



UNIVERSAL FABRIC LEG STRAPS

For use with most vinyl, latex and rubber urinary leg bags

- Provides a superior fit over standard latex leg straps
- Fully adjustable self-gripping fasteners make application safe and simple
- Elastic sections make them flexible and comfortable
- Durable, reusable and hand or machine washable

6390
One Pair
Fits 8" thru 24" (20 cm thru 61 cm)

† Approximate dimensions in inches(″) and centimeters(cm)

IMPORTANT! READ THIS FIRST:

For best results, take certain precautions before using these straps. Be certain that there is no loose stitching or other irregularities before each use. Those with known allergic reactions to certain materials (especially neoprene rubber) should not wear these straps. Discontinue use at first signs of dermatitis or any other type of skin irritation and contact a physician immediately.

CAUTION: Do not over-tighten straps; products made with elastic and/or neoprene rubber material can—if improperly fit—cause circulation restriction or skin breakdown; however, a bag strapped too loosely can slip down the leg and cause damage to male external or Foley catheters by stretching them. Should any discomfort occur while wearing, discontinue use immediately and contact a fitter or physician. To avoid possible drainage problems, read all instructions and precautions carefully before use. Only allow a urinary drainage bag to fill to its maximum capacity in emergency situations.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

1. Be certain the bottom drain valve/thumb clamp is closed to prevent spills.
2. Wrap the straps around the leg on either the thigh or calf. If the straps are too long, trim by cutting only the elastic section between the loop to achieve the desired length.
3. Thread the ends of the straps with the Urocare® logo through the leg bag eyelets so that the straps run behind the leg bag as shown in Figure 1.
4. Place the leg bag in the desired location on the leg and fasten the ends of the straps together—the straps should be snug yet comfortable.

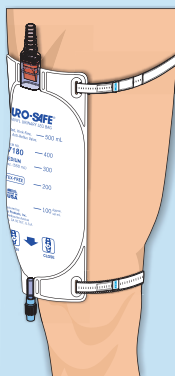


FIGURE 1

WASHING INSTRUCTIONS:

Close straps (Velcro® fasteners) before washing. Hand or machine wash cold—gentle/delicate. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not wring. Dry in shade. Do not iron. Do not dry clean.



For more information on this or any other Urocare product, please visit our website at www.urocare.com. To place an order, please contact your health care provider.

 Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



US and Canada: +1 (800) 423-4441
Outside the US: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

LEARN MORE



MADE IN
CHINA



PLEASE
RECYCLE

FN: P16390EN-69601101D



SANGLES UNIVERSAL JAMBE TISSU

Pour une utilisation avec la plupart de vinyle, en latex et de caoutchouc sacs de jambe urinaires

- Fournit un confort supérieur au cours sangles en latex standard
- Entièrement réglable attache auto-agrippantes en faire la demande simple et Sûre
- Sections élastiques rendre eux flexible et confortable
- Durable, réutilisable et lavable à la machine ou à la main

6390
Une Paire
Pointures 20cm à 61cm

† Dimensions approximatives pouces (") et centimètres (cm)

IMPORTANT! LISEZ CECI EN PREMIER:

Pour de meilleurs résultats, prendre certaines précautions avant d'utiliser ces sangles. Soyez certain qu'il n'y a pas de coutures lâches ou autres irrégularités avant chaque utilisation. Ceux qui ont connu des réactions allergiques à certains matériaux (caoutchouc néoprène en particulier) ne doit pas porter ces sangles. Cesser d'utiliser dès les premiers signes de la dermatite ou tout autre type d'irritation de la peau et de contacter immédiatement un médecin.

ATTENTION: Ne pas trop serrer les sangles; produits fabriqués avec élastique et / ou du matériel en caoutchouc néoprène peut—s'il est mal ajusté—restriction de circulation cause ou dégradation de la peau; toutefois, un sac attaché trop lâche peut se glisser jusque dans la jambe et de causer des dommages aux hommes externe ou cathétères de Foley en les étirant. En cas de malaise, tout en portant, cesser d'utiliser immédiatement et contactez un ajusteur ou un médecin. Pour éviter les problèmes de drainage possible, lire toutes les instructions et les précautions avant de l'utiliser. N'autorisez un sac de drainage urinaire pour remplir à sa capacité maximale en cas d'urgence.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

1. Soyez certain que la vanne de fond vidange est fermé pour prévenir les déversements.
2. Enrouler les sangles autour de la jambe soit sur la cuisse ou au mollet. Si les sangles sont trop longues, assiette de coupe que l'élastique entre les séparations dans la boucle pour atteindre la longueur désirée.
3. Passer l'extrémité de la sangle avec le logo Urocure® à travers le sac jambe oeillets de sorte que les sangles courent derrière le sac jambe comme le montre la figure 1.
4. Placez le sac jambe dans l'endroit désiré sur la jambe et fixer les extrémités des sangles ensemble—les sangles doivent être bien ajustées et confortables.

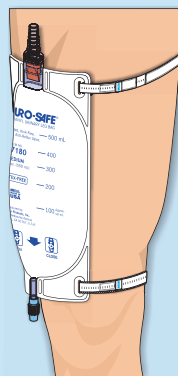


FIGURE 1

INSTRUCTIONS DE LAVAGE:

Fermer sangles (attaches Velcro®) avant le lavage. Main ou en machine à laver à froid—doux/délicat. Ne pas blanchissez. Ne pas dégringolez sec. N'extorquez pas. Séchez à l'ombre. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.



Pour plus d'informations sur ce produit ou tout autre produit Urocure, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.urocure.com. Pour passer une commande, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.



Urocure Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



États-Unis et Canada: +1 (800) 423-4441
À l'extérieur des États-Unis: +1 (909) 621-6013



sales@urocure.com

EN SAVOIR PLUS



Fabriqués
en Chine



VEUILLEZ
RECYCLER

FN: P16390FR-69601102D



UNIVERSAL TEXTIL BEINGURTE

Für den Einsatz mit den meisten Vinyl, Latex und Gummi Beinbeutel

- Bietet eine überlegene Passform über Standard-Latex Beingurte
- Vollständig einstellbare selbst-greifend Verschluss macht Anwendung einfache und sicher
- Elastische Abschnitte machen sie flexibel und bequem
- Haltbar, wiederverwendbar und Hand oder Maschinenwäsche

6390
Ein Paar **6390**
Passt 20cm bis 61cm

† Ungfähre Maße in Zoll (") und Zentimetern (cm)

WICHTIG! LESEN SIE DIESE HINWEISE BITTE ZUERST:

Für beste Ergebnisse, nehmen Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bevor Sie diese Bänder Anwenden. Seien Sie sicher, dass es keine losen Heften oder anderen Unregelmäßigkeiten vor jedem Gebrauch. Diejenigen mit bekannten allergischen Reaktionen auf bestimmte Materialien (besonders Neoprengummi) sollten diese Bänder nicht tragen. Unterbrechen Sie bei den ersten Anzeichen von Dermatitis oder jede andere Art von Hautreizungen und setzen Sie sich mit einem Arzt sofort in Verbindung.

ACHTUNG: Bänder nicht zu fest anziehen; Produkte mit elastischen und/oder Neopren können—wenn unsachgemäß gepasst—Kreislauf einschränkung oder Hautschäden führen aber, ein Beutel der zu locker befestigt ist kann am Bein nach unten rutschen und verursachen Schäden an Foley oder externe Katheter für Männer durch Streckung. Sollten irgendwelche Beschwerden auftreten, während des Tragens, beenden Sie Nutzung und setzen Sie sich mit einem Arzt sofort in Verbindung. Zur Vermeidung möglicher Entwässerung Probleme, lesen Sie alle hinweisungen und Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch sorgfältig. Erlauben Sie ein Beinbeutel nur zu ihrer maximalen Kapazität in Notsituationen zu füllen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Seien Sie sicher, das Ablassventil/die Klemme geschlossen ist, um verschütten zu verhindern.
2. Wickeln Sie die Bänder um das Bein entweder auf die Oberschenkel oder der Wade. Wenn die Bänder zu lang sind, können sie gekürzt werden: Nur die elastisch teilen zwischen das Schleife Material schneiden auf die gewünschte Länge zu erreichen.
3. Führen Sie die Enden der Bänder mit den Urocure Emblem durch die Beinbeutel Ösen, so daß die Bänder hinter dem Beinbeutel laufen, wie in Abbildung 1 dargestellt.
4. Setzen Sie den Beinbeutel an der gewünschten Stelle am Bein und befestigen Sie die Enden der Bänder zusammen—Die Bänder müssen eng, aber bequem anliegen sein.

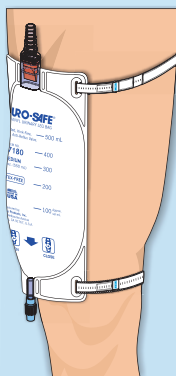


ABBILDUNG 1

WASCHANLEITUNG:

Vor dem Waschen, setzen Sie die Enden der Bänder (Velcro® Verschlüsse) zusammen. Hand oder Maschinenwäsche kalt—leicht/empfindlich. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht auswringen. Im Schatten trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.



Für weitere Informationen zu diesem oder anderen Urocure-Produkten besuchen Sie bitte unsere Webseite www.urocure.com. Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Gesundheitsdienstleister.



Urocure Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
U.S.A.



USA und Kanada: +1 (800) 423-4441
Außerhalb der USA: +1 (909) 621-6013



sales@urocure.com

MEHR ERFAHREN



HERGESTELLT
IN CHINA



BITTE
RECYCLEN

FN: P16390DE-69601103D



UNIVERSAL CORREAS DE TELA PIERNA

Para el uso con la mayoría de vinilo, látex y caucho bolsas de orina pierna

- Proporciona un mejor ajuste encima correas estándares pierna látex
- Completamente ajustable sujetadores auto-agarre hacer una aplicación segura y simple
- Secciones elástico hacerlos flexibles y cómodos
- Duraderos, reutilizables y lavables a mano oa máquina

6390
Un Par

Se adapta a los tamaños de 20cm a 61cm

† Dimensiones aproximadas en pulgadas (") y centímetros (cm)

¡IMPORTANTE! LEA ESTO PRIMERO:

Para obtener los mejores resultados, tome ciertas precauciones antes de usar estas correas. Asegúrese de que no hay costuras sueltas u otras irregularidades antes de cada uso. las personas con reacciones alérgicas conocidas a ciertos materiales (goma de neopreno especial) no deben usar estas correas. Suspenda su uso ante los primeros signos de la dermatitis o cualquier otro tipo de irritación de la piel y consulte a su medico inmediatamente.

PRECAUCIÓN: No apriete demasiado las correas; productos hechos con elástico y/o material de goma de neopreno puede—si incorrectamente aduste—causa la restricción de circulación o de ruptura de la piel; Sin embargo, una bolsa atada demasiado flojos pueden resbalar por la pierna y causar daños a Foley o catéteres externos masculinos de estiramiento. En caso de producirse alguna molestia mientras esté usando, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con un ajustador o un médico. Para evitar posibles problemas de drenaje, lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar. Permitir sólo una bolsa de drenaje urinario para llenar a su máxima capacidad en situaciones de emergencia.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

1. Asegúrese de que la válvula de drenaje de la parte inferior / pinza pulgar es cerrado para evitar derrames.
2. Envuelva las correas alrededor de la pierna a ambos el muslo o la pantorrilla. Si las correas son demasiado largos, corte por corte sólo la sección elástico entre el bucle para conseguir el tamaño deseado.
3. Pase los extremos de las correas con el emblema Urocare través de los ojales de la bolsa en la pierna manera que las correas correr detrás de la bolsa en la pierna como se muestra en la Figura 1.
4. Coloque la bolsa de pierna en la posición deseada en la pierna y ate los extremos de las correas juntas—las correas debe ser ajustado y confortable.

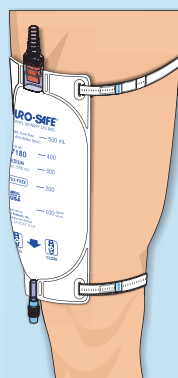


FIGURA 1

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

Cerrar las correas (Velcro® sujetadores) antes de lavar. Mano o en lavadora en frío—suave/delicado. No usar blanqueador. No secar en secadora. No escurra. Secar en la sombra. No planchar. No tintorería.



Para más información sobre este u otros productos de Urocare, por favor visite nuestro sitio web en www.urocare.com. Para realizar un pedido, comuníquese con su proveedor de atención médica.



Urocare Products, Inc.
2735 Melbourne Avenue
Pomona, CA 91767-1931
EE. UU.



EE. UU. y Canadá: +1 (800) 423-4441
Fuera de los EE.UU: +1 (909) 621-6013



sales@urocare.com

MÁS INFORMACIÓN



HECHOS
EN CHINA



POR FAVOR,
RECYCLE

FN: P16390ES-69601104D